

安全キャビネット


KD401～ 安全キャビネットCLASSII KSシリーズ

- 究極の99.999%のクリーンエアを達成した、世界最高レベルの安全性です。【ULPAフィルター0.3 μ m粒子】安全度は従来製品の10倍です。
 - 見やすく、作業性を高める為に前面ガラスは斜めになっています。
 - ガラスの内側や内部の掃除が大変楽になりました。
- ワークスペース幅900～1,800mm
と豊富なサイズと経済的な価格です。



システムの安全性をパフォーマンス・ファクター（PER値）として0～100の数字で表示します。

- 1) 100～60は安全性が十分確保され、全く問題ありません。
- 2) 60～30では安全性は十分ですが、フィルターの交換時期が近づいています。
- 3) 30以下はメンテナンスが必要です。

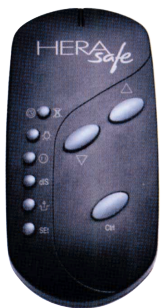

リモコンによる電動開閉が安全性と使い易さを両立させます。

- 1) リモコンボタンの操作により、自動的にシールが解除され、前面ガラスは上下開閉します。
- 2) ガラスが所定の位置に達すると停止し、自動的に完全にシールされます。
- 3) これらにより操作中と閉鎖中は、ガラスの両端が完全にシールされます。さらにスムーズで簡単な、ガラスドアの開閉が可能になりました。

コードNo.	KD401	KD402	KD403	KD404
集塵機能	ULPAフィルター 0.3 μ m粒子で99.999%			
規格	NSF49、UL3101-1、EN12469、BS5720、IEC101に合格			
ワークスペース幅	900mm	1,200mm	1,500mm	1,800mm
電源	100V 15A			
価格	1,470,000	1,598,000	1,880,000	2,250,000

CO₂インキュベーター

KD301～

全自動滅菌機構付 CO₂インキュベーター

**90℃の蒸気で
9時間の完全滅菌を
全自動で行います。**



ヘラセル150



ヘラセル150のダブルチャンバーでの設置例

- 滅菌の完璧さはUSP (世界標準検査法) の方法でテストされ、合格・証明されています。
- 芽胞、菌さらにマイコプラズマにも有効です。
- CO₂濃度精度は±0.1%以内と正確で、ドア開放後も5分以内に迅速に現状復帰します。
- FDA (米国食品医薬品局) に承認され登録されています。

内 容 量	240リットルタイプ	151リットルタイプ
外 寸	W780×H930×D830mm	W640×H870×D770mm
有 効 内 寸	W610×H670×D580mm	W470×H610×D530mm
温度制御範囲	室温±3～55℃	
湿度範囲	95% rH以上	
CO ₂ 濃度精度	0～20% ±0.1%以内	
O ₂ 濃度範囲 (マルチの場合)	1～21%または5～90%のどちらかを選択	
重量・電源	85kg・100V 50/60Hz 12A	75kg・100V 50/60Hz 7A

コードNo.	摘 要	価 格
KD301	151リットル	980,000
KD302	240リットル	1,380,000
KD303	300リットル (ダブルチャンバー)	1,960,000
KD305	150リットル マルチ CO ₂ /O ₂	1,450,000
KD306	240リットル マルチ CO ₂ /O ₂	1,820,000

KD307

パーソナルCO₂インキュベーター Midi40



- 内容は40Lで、サイズも小さく設置場所を選びません。
- 高さ47cmですから、机の上に2段重ねや、床置き3段積みも可能です。
- 明るく見やすいディスプレイと、スリーボタンの簡単な操作キーです。

コードNo.	KD307
内 容 量	40リットル
外 寸	W600×H470×D470mm
有 効 内 寸	W360×H360×D310mm
温度制御範囲	室温±5～60℃
湿度範囲	95% rH以上
CO ₂ 濃度精度	0～20% ±0.1%以内
重量・電源	75kg・100V 50/60Hz 7A
価 格	550,000

●本製品群は研究・試験用の機器であり、医療および治療用ではありません。

MMC
MINATO MEDICAL CORPORATION
ミナトメディカル株式会社

本郷営業所

〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-10 フドウ山本ハイツ601

TEL: 03-5803-9876(代) FAX: 03-5803-9873

E-mail: hongo@minatomedical.com

※仕様・写真等は改良のため予告なしに変更することがあります。