


白血球像計数装置

KA010-04

白血球像計数装置(PCタイプ) H-1ANS

- 白血球像12項目および赤血球系コメント12項目が専用キーボードにより、簡便に入力できます(項目名称表示:印字等の変更も可能です)。
- EBL等合計外項目の設定も可能です。
- %は小数点以下1位と小数点なしの設定が可能です。
- 100カウントで足りない場合には200カウントに瞬時に切り替えられます。
- 独自の処理方法により、半端な計数でも%の合計が必ず100になるように設定してありますので、150カウントでも可能です。
- データの保存はテキストスタイルで簡単に編集できます。
- RS232C(シリアルポート)で外部出力が可能です。
- 報告書印刷:画面印刷が可能です。(Excel、Word付属)

《ハード構成例》
 ノートパソコン
 プリンター
 オリジナル20キーボード

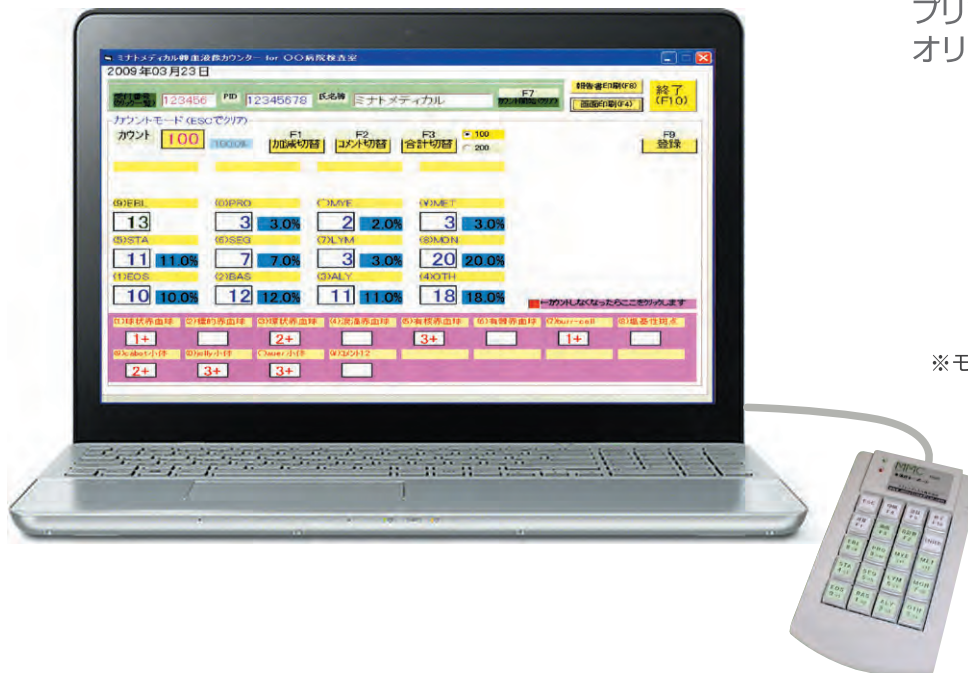

※モニターはハメコミ画像です。

KA010-04 H-1ANS(ノートPC)

¥325,000

白血球像計数装置

カウント画面



キーボード



- ◎減算はF1減算キーを押し、項目キーを押せば簡易に減算できます
- ◎※1～※12が赤血球系コメントです
- ◎項目名称表示、コメント名称印字は変更可能です

印字例

血液像検査報告書

受付日: 2009年03月23日
 受付番号: 123456
 PID: 12345678
 氏名等: ミナトメディカル

白血球像			赤血球系コメント	
項目	%	カウント	項目	カウント
EOS	10.0%	10	球状赤血球	1+
BAS	12.0%	12	標的赤血球	2+
ALY	11.0%	11	環状赤血球	3+
OTH	18.0%	18	涙滴赤血球	3+
STA	11.0%	11	有核赤血球	1+
SEG	7.0%	7	有棘赤血球	2+
LYM	3.0%	3	burr-cell	1+
MON	20.0%	20	塩基性斑点	2+
EBL	13	13	cabot小体	3+
PRO	3.0%	3	jolly小体	3+
MYE	2.0%	2	auer小体	3+
MET	3.0%	3	コメント12	
合計	100.0%	100		

○○病院 検査室

オンラインの標準仕様等はメールにてお問い合わせください



ミナトメディカル株式会社

〒362-0075 埼玉県上尾市柏座2-8-8

TEL: 048-779-2138(代) FAX: 048-779-2139

mmc@minatomedical.com

http://www.minatomedical.com/

※仕様・デザイン等は改良のため予告なしに変更することがあります。